



Дистилляторы Isolab

Лабораторные дистилляторы для получения апиrogenной воды производительностью 3,5 и 7,5 л/час. Занимают мало места, отличаются удобной конструкцией с экономичным потреблением электроэнергии и воды. Поставляют дистиллированную воду лабораторного качества, свободную от пирогенов.

Двухстенная бесшовная внутренняя камера изготовлена из кавитационно- и коррозионностойкой стали. Легко снимающийся конденсатор обеспечивает быструю и эффективную очистку камеры. Интегрированная система защиты отключает нагрев в случае отсутствия воды или резкого роста температуры.


Автоматические предохранители обеспечивают безопасность пользователя в случае перегрева и колебания параметров электропитания.



623.01.004

Информация для заказа:

Модель	623.01.004	623.01.004
Производительность, л/ч	3,5	7,5
Проводимость воды, мкСм	2,3	2,3
Контроллер	Гидравлический термостат	
Расход воды на охлаждение, л/ч	30-50	60-80
Электропитание, В	220	220
Потребляемая мощность, кВт	3,0	6,0
Габариты, мм	380x290x580	380x365x640

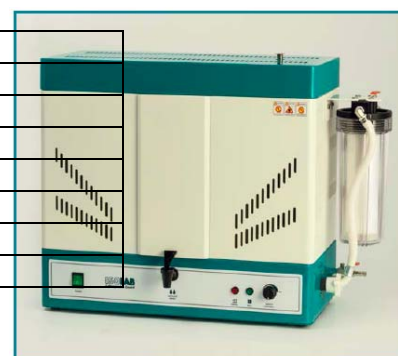

623.02.004

Автоматические дистилляторы Isolab

Дистилляторы производительностью 4 и 8 л/ч с накопительным баком. Отличаются компактной конструкцией с экономичным потреблением электроэнергии и воды. Поставляют дистиллированную воду лабораторного качества, свободную от пирогенов.

Большой встроенный бак сохраняет произведенную воду. Двухстенная бесшовная внутренняя камера изготовлена из кавитационно- и коррозионностойкой стали.

Легко снимающийся конденсатор обеспечивает быструю и эффективную очистку камеры.

Система предварительной фильтрации предотвращает проникновение нежелательных примесей.

Интегрированная система защиты отключает нагрев в случае отсутствия или низкого уровня воды или в случае резкого роста температуры.



Информация для заказа:

Модель	623.02.004	623.02.004
Производительность, л/ч	4	8
Проводимость воды, мкСм	2,3	2,3
Накопительная емкость, л	8	14
Контроллер	Гидравлический термостат	
Расход воды на охлаждение, л/ч	30-50	60-80
Электропитание, В	220	220
Потребляемая мощность, кВт	3,0	6,0
Габариты, мм	740 x 345 x 515	680 x 360 x 650

623.11.110

Предварительный фильтр для автоматических дистилляторов Isolab