

ДИСПЕНСЕР - «тактовый»



- Эргономичный и легкий диспенсер для быстрого и простого многократного дозирования жидкостей.
- Идеальный инструмент для случаев, когда требуется многократное дозирование, а время играет очень важную роль.
- Предельно простое использование. Вначале заполните диспенсер жидкостью, аналогично шприцу. Затем нажимайте кнопку пипетки для каждого этапа дозирования.
- Все функции могут выполняться с помощью всего трех управляющих механизмов.
- 5 настроек объема и 7 насадок различного размера обеспечивают 35 различных объемов дозирования.
- В зависимости от размера и объема используемой насадки, возможно дозирование жидкости от 0,5 мл до 50 мл за несколько интервалов.
- Работает по принципу прямого вытеснения, что позволяет быстро и точно дозировать даже жидкости с высокой вязкостью и высоким давлением паров.
- Позволяет выполнять дозирование в течение многих часов, не уставая.
- Гарантирует точную настройку объема, четко видимую регулировку, а прецизионный зубчатый механизм обеспечивает воспроизводимое и точное дозирование.
- Замена насадок выполняется просто и безопасно.
- Объем дозирования можно выбрать по шкале, расположенной на корпусе диспенсера.

катал.
номер
008.06.001

кол-во
в уп.
1 шт.




Объем дозирования можно выбрать по шкале, расположенной на корпусе диспенсера.

НАСАДКИ - «для тактовых диспенсеров»

- Насадки для диспенсеров изготавливаются из бесцветного полипропилена.
- 7 насадок различного размера обеспечивают 35 различных объемов дозирования.
- В зависимости от выбранной насадки, возможно дозирование жидкости от 0,5 мл до 50 мл за несколько интервалов.
- Градуировка на боковой поверхности насадки обеспечивает визуальное подтверждение объема.
- Адаптер для насадок 25 и 50 мл должен быть заказан отдельно, кат. №: 008.06.002

катал. номер	объем насадки	кол-во в уп.
008.06.005	0,50 мл	10 шт.
008.06.012	1,25 мл	10 шт.
008.06.025	2,50 мл	10 шт.
008.06.050	5,00 мл	10 шт.
008.06.125	12,50 мл	10 шт.
008.06.250	25,00 мл	10 шт.
008.06.500	50,00 мл	10 шт.
008.06.002	адаптер для 25 и 50 мл	

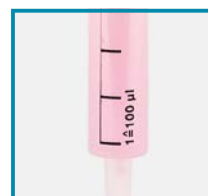

Градуировка на боковой поверхности насадки обеспечивает визуальное подтверждение объема.

