



Магнитные мешалки VELP Scientifica

Аналоговая Магнитная мешалка Microstirrer

Маленькая магнитная мешалка для микротитрования с механическим регулятором скорости до 1100 об / мин. и перемешиваемым объемом до 5 литров.
Панель управления с защитой от пролитой жидкости.
Корпус из стали с полимерным покрытием не нагревается даже после нескольких дней непрерывного использования.
Габариты 120 x 128 x 48 мм. Масса 0,55 кг. Мощность 0,6 Вт.
Универсальное электропитание 100-240В / 50-60 Гц.

Код производителя F203A0161.



Microstirrer

Ультраровкая магнитная мешалка ESP

Магнитная мешалка без движущихся компонентов с диапазоном скоростей до 1100 об. / мин. и объемом до 5 л. Идеально подходит для микротитрования, микробиологии и биохимии. Не требует обслуживания - нет движущихся частей.
Корпус из технополимера устойчив к воздействию химикатов.
Панель управления защищена от попадания жидкостей.
Плавный пуск, быстрое достижение заданной скорости.
Может использоваться при температурах от -10 до + 60 °С.
Габариты 160 x 230 x 33 мм, Масса 0,9 кг. Мощность 5 Вт.
Универсальное электропитание 100-240В / 50-60 Гц.

Код производителя F206A0179.



ESP

Аналоговая магнитная мешалка MST

Компактная магнитная мешалка с механическим регулятором скорости до 1100 об / мин. и перемешиваемым объемом до 5 литров. Идеально подходит для микротитрования, определения БПК, микробиологии и биохимии. Корпус из технополимера устойчив к воздействию химикатов и не нагревается даже после нескольких дней непрерывного использования. Отличный контроль скорости.
Габариты 120 x 145 x 50 мм, Масса 0,4 кг. Мощность 0,6 Вт.
Универсальное электропитание 100-240В / 50-60 Гц.

Код производителя F203A0440.



MST

Цифровая магнитная мешалка MST Digital

Компактная магнитная мешалка с цифровым дисплеем, регулировкой скорости до 1500 об / мин., таймером и автореверсом. Перемешиваемый объем до 5 литров. Идеально подходит для микротитрования, биохимии, микробиологии, определения БПК. Корпус из технополимера устойчив к воздействию химикатов и не нагревается даже после нескольких дней непрерывного использования. Отличный контроль скорости. Габариты 120 x 145 x 50 мм, Масса 0,6 кг. Мощность 0,6 Вт. 100-240В / 50-60 Гц.

- Оснащена безколлекторным двигателем.
- Регулировка скорости до 1500 об / мин с шагом 10 об./мин.
- Встроенный таймер (1-900 мин или непрерывный). Программы прерывистого режима.
- Функция блокировки безопасности.
- Автоматическое изменение направления перемешивания для обеспечения лучшего перемешивания (настройки автореверса от 5 до 900 с.).
- Технология SpeedServo TM, обеспечивающая постоянный счетчик скорости, реагирующий на изменения вязкости.

Код производителя F203A0450.



MST Digital



Аналоговая магнитная мешалка MSL8

Применяется для перемешивания больших (до 8 л) объемов жидкостей с низкой вязкостью в биологии и фармацевтике.

Подходит для приготовления буферных растворов, подготовки буфера и WFI (вода для инъекций), особенно в отделе переработки и сбыта в фармацевтике, подготовки образца для буферного раствора, который будет использоваться для растворения в аппарате для растворения. Также применяется в производстве вакцин, при работе с культурами клеток и тканей (с вращающимися колбами). Может использоваться с бутылками из налгена, а также со стеклянными бутылками большого объема.



- Перемешивает жидкость объемом до 8 л. (H₂O).
- Безколлекторный двигатель обеспечивает непрерывную работу на любой скорости.
- Диапазон скоростей от 40 до 1500 об / мин. с точностью установки 10 об./мин.
- Технология SpeedServo™ поддерживает постоянную скорость перемешивания.
- Мягкое начало работы для защиты образца.
- Панель управления с защитой от пролитой жидкости.
- Корпус из стали с полимерным покрытием. Прочная крышка из нержавеющей стали.
- Габариты 168 x 183 x 60 мм. Масса 0,95 кг. Мощность 4,5 Вт.
- Универсальное электропитание 100-240В / 50-60 Гц.

Код производителя F203A0513.

Цифровая магнитная мешалка MSL8 Digital

Цифровая магнитная мешалка для объема до 8 литров, гарантирующая непрерывную работу как на низкой, так и на высокой скоростях, с таймером и автореверсом. Идеальное решение для лабораторного перемешивания большой емкости в науках о жизни и фармацевтике.

Подходит для приготовления буферных растворов, подготовки буфера и WFI (вода для инъекций), особенно в отделе переработки и сбыта в фармацевтике, подготовки буферного раствора, который будет использоваться в аппарате для растворения. Также применяется в производстве вакцин, при работе с культурами клеток и тканей (с вращающимися колбами). Может использоваться с бутылками из налгена, а также со стеклянными бутылками большого объема.



- Перемешивает жидкость объемом до 8 л. (H₂O)
- Диапазон скоростей от 40 до 1500 об / мин. с точностью установки 10 об./мин.
- Безколлекторный двигатель обеспечивает непрерывную работу на любой скорости.
- Технология SpeedServo™ поддерживает постоянную скорость перемешивания.
- Мягкое начало работы для защиты образца.
- Яркий цифровой дисплей.
- Встроенный таймер (1-99 мин или непрерывная работа).
- Программы прерывистого режима.
- Функция блокировки безопасности.
- Автоматическое изменение направления перемешивания для обеспечения лучшего перемешивания (настройки автореверса от 5 до 99 мин, 55 с.).
- Панель управления с защитой от пролитой жидкости.
- Корпус из стали с полимерным покрытием. Прочная крышка из нержавеющей стали.
- Габариты 168 x 183 x 60 мм. Масса 0,95 кг. Мощность 5 Вт.
- Универсальное электропитание 100-240В / 50-60 Гц.

Код производителя F203A0510.



Цифровая магнитная мешалка MSL25 Digital

Цифровая магнитная мешалка для объема до 25 литров с таймером и автореверсом. Применяется для перемешивания больших объемов жидкостей с низкой вязкостью в биологии и фармацевтике.

Подходит для приготовления буферных растворов, подготовки буфера и WFI (вода для инъекций), особенно в отделе переработки и сбыта в фармацевтике, подготовки буферного раствора для аппарата растворения. Также применяется в производстве вакцин, при работе с культурами клеток и тканей. Может использоваться с бутылками из налгена, а также со стеклянными бутылками большого объема.



- Перемешивает жидкость объемом до 25 л. (H₂O)
- Диапазон скоростей от 40 до 1500 об / мин. с точностью установки 10 об./мин.
- Безколлекторный двигатель обеспечивает непрерывную работу на любой скорости.
- Технология SpeedServo TM поддерживает постоянную скорость перемешивания.
- Мягкое начало работы для защиты образца.
- Яркий цифровой дисплей.
- Встроенный таймер (1-99 мин или непрерывная работа).
- Программы прерывистого режима.
- Функция блокировки безопасности.
- Автоматическое изменение направления перемешивания для обеспечения лучшего перемешивания (настройки автореверса от 5 до 99 мин, 55 с.).
- Панель управления с защитой от пролитой жидкости.
- Корпус из стали с полимерным покрытием. Прочная крышка из нержавеющей стали.
- Габариты 253 x 269 x 71 мм. Масса 1,8 кг. Мощность 9 Вт.
- Универсальное электропитание 100-240В / 50-60 Гц.

Код производителя F203A0511.

Цифровая магнитная мешалка MSL50 Digital

Цифровая магнитная мешалка для объема до 50 литров с таймером и автореверсом. Идеальное решение для перемешивания большого объема жидкостей в биологических науках, фармацевтике, биофармацевтике и нутрицевтике.

Подходит для приготовления буферных растворов, подготовки буфера и WFI (вода для инъекций), особенно в отделе переработки и сбыта в фармацевтике, подготовки буферного раствора для аппарата растворения. Также применяется в производстве вакцин, при работе с культурами клеток и тканей. Может использоваться с бутылками из налгена, а также со стеклянными бутылками большого объема.

- Перемешивает жидкость объемом до 50 л. (H₂O)
- Диапазон скоростей от 20 до 1000 об / мин. с точностью установки 10 об./мин.
- Безколлекторный двигатель обеспечивает непрерывную работу на любой скорости.
- Технология SpeedServo TM поддерживает постоянную скорость перемешивания.
- Мягкое начало работы для защиты образца.
- Яркий цифровой дисплей.
- Встроенный таймер (1-99 мин или непрерывная работа).
- Программы прерывистого режима.
- Функция блокировки безопасности.
- Автоматическое изменение направления перемешивания для обеспечения лучшего перемешивания (настройки автореверса от 5 до 99 мин, 55 с.).
- Панель управления с защитой от пролитой жидкости.
- Корпус из стали с полимерным покрытием. Прочная крышка из нержавеющей стали.
- Габариты 354 x 369 x 77 мм. Масса 4 кг. Мощность 10 Вт.
- Универсальное электропитание 100-240В / 50-60 Гц.

Код производителя F203A0512.



Магнитная мешалка с подсветкой AMI


Скорость перемешивания до 1100 об./мин.
Максимальный объем перемешивания – 5 л (H₂O). Идеально подходит для микротитрования, особенно, для незначительных изменений цвета титруемых жидкости.

- Освещенная поверхность для визуализации частиц и изменения цвета.
- Возможность регулировки яркости подсветки.
- Корпус выполнен из стали с полимерным покрытием.
- Панель управления с защитой от пролитой жидкости.
- Мощный приводной магнит типа РСМ, управляемый однофазным двигателем для непрерывной работы.
- Отличная регулировка скорости даже на низких оборотах.
- Плавный пуск, быстрое достижение заданной скорости.
- Габариты 150 x 270 x 55 мм. Масса 1,2 кг. Мощность 1,2 Вт.
- Универсальное электропитание 100-240В / 50-60 Гц.

Код производителя F204A0167.



AMI

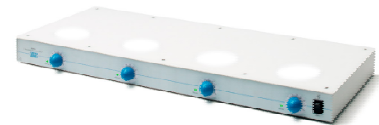

AMI 4

4-х местная магнитная мешалка с подсветкой AMI 4

Скорость перемешивания до 1100 об./мин. Максимальный объем перемешивания до 4 x 5 л (H₂O). Идеально подходит для микротитрования, особенно, для незначительных изменений цвета титруемых жидкости.

- Освещенная поверхность для визуализации частиц и изменения цвета.
- Возможность регулировки яркости подсветки.
- Корпус выполнен из стали с полимерным покрытием.
- Панель управления с защитой от пролитой жидкости.
- Мощные приводные магниты типа РСМ, управляемые однофазным двигателем.
- Независимые регуляторы скорости для каждой позиции.
- Отличная регулировка скорости даже на низких оборотах.
- Плавный пуск, быстрое достижение заданной скорости.
- Габариты 600 x 270 x 55 мм. Масса 4 кг. Мощность 4,8 Вт.
- Универсальное электропитание 100-240В / 50-60 Гц.

Код производителя F204A0168.

Многопозиционные магнитные мешалки Multistirrer 6 и Multistirrer 15

6-ти и 15-местные магнитные мешалки с механическим регулятором скорости 80-1500 об / мин. и перемешиваемым объемом до 6 x 400мл и 15 x 250 мл соответственно. Идеально подходит для микротитрования, микробиологии и биохимии. Могут применяться для установки на них поликарбонатных ванн циркуляционных водяных термостатов.

- Корпус из стали с полимерным покрытием не нагревается даже после нескольких дней непрерывного использования.
- Светлая поверхность помогает лучше контролировать изменения цвета жидкости при титровании.
- Панель управления с защитой от пролитой жидкости.
- Мощные приводные магниты типа РСМ, управляемые однофазным двигателем.
- Синхронная регулировка скорости для всех позиций.
- Плавный пуск, быстрое достижение заданной скорости.
- Габариты 230 x 370 x 51,5 мм. Масса 1,75 кг / 2,1 кг.
- Мощность 3,6 Вт / 9 Вт. Электропитание 100-240В / 50-60Гц.

Код производителя F203A0177 (Multistirrer 6)

Код производителя F203A0178 (Multistirrer 15)



Multistirrer 6

Расстояние между центрами позиций 100 мм



Multistirrer 15

Расстояние между центрами позиций 74 мм



Многопозиционные магнитные мешалки Multistirrer Digital 6 и Multistirrer Digital 15

6-ти и 15-местные магнитные мешалки с регулятором скорости 80-1500 об / мин. и перемешиваемым объемом до 6 x 400мл и 15 x 250 мл соответственно. Могут применяться для установки на них поликарбонатных ванн циркуляционных водяных термостатов. Идеально подходит для микротитрования, микробиологии и биохимии.

- Мощные приводные магниты типа РСМ, управляемые однофазным двигателем.
- Синхронная регулировка скорости для всех позиций.
- Диапазон скоростей от 80 до 1500 об / мин. с точностью установки 10 об./мин.
- Плавный пуск, быстрое достижение заданной скорости.
- Технология SpeedServo TM поддерживает постоянную скорость перемешивания.
- Автоматическое изменение направления перемешивания для обеспечения лучшего перемешивания (настройки автореверса от 5 до 900 с.).
- Встроенный таймер (1-900 мин или непрерывная работа).
- Программы прерывистого режима.
- Функция блокировки безопасности.
- Корпус из стали с полимерным покрытием не нагревается даже после нескольких дней непрерывного использования.
- Светлая поверхность помогает лучше контролировать изменения цвета жидкости при титровании.
- Панель управления с защитой от пролитой жидкости.



Multistirrer Digital 6
Расстояние между центрами позиций 100 мм



Multistirrer Digital 15
Расстояние между центрами позиций 74 мм

Габариты 230 x 370 x 51,5 мм. Масса 1,75 кг / 2,1 кг.

Мощность 3,6 Вт / 9 Вт. Электропитание 100-240В / 50-60 Гц.

Код производителя F203A0179 (Multistirrer digital 6)

Код производителя F203A0180 (Multistirrer digital 15)

Аксессуары

A00001056 Якорь для магнитной мешалки 6x35 мм

A00001057 Якорь для магнитной мешалки 6x20 мм